

Fotona[®]
choisissez la perfection

Dynamis

Système laser à
applications multiples



choisissez la perfection

Laser

Une performance et une commodité

Principaux avantages

- Traitements tissulaires sélectifs de haute précision
- Sélection des paramètres intuitive et facile à utiliser
- Le plus grand éventail de modes de traitement
- Gamme impressionnante d'accessoires de pointe
- Traitements sûrs et peu invasifs avec de courts temps de guérison
- Confort et satisfaction optimaux des patients

Bras Rotoflex ergonomique
pour **les opérations légères**

Technologie à double longueur
d'onde pour **une grande
gamme de traitements**

Interface utilisateur graphique
intuitive et intelligente

Accès instantané aux procédures
préprogrammées sur grand écran

Pédale de commande sans
fil pour **un accès facile**

Dynamis

Qualité incomparables, main dans la main

Optique de faisceaux à profil homogène
pour **des traitements uniformes et des résultats prévisibles**

Double contrôle de l'énergie EFC pour
garantir **la précision de l'émission laser**

Gamme complète d'embouts à main et de
scanners pour **une polyvalence supérieure**

Technologie brevetée à impulsions carrées variables offrant
une gamme complète de modes de traitements

L'UN DES MEILLEURS LASERS ROI

"Dynamis est une plateforme polyvalente et extrêmement bien construite offrant une grande gamme d'applications (plus de 50 applications autorisées par la FDA) dans les secteurs de la dermatologie, la chirurgie, l'ORL, la podologie, l'ophtalmologie, la gynécologie et les soins esthétiques. C'est l'un des meilleurs lasers ROI dont je dispose et aucun consommable n'est nécessaire : c'est la Rolls-Royce des lasers, parfaitement construite à la main. Il s'agit sans nul doute de l'un des meilleurs lasers que j'aie utilisés."

M. Taylor, États-Unis

Technologie


Deux longueurs d'onde complémentaires avec la tech

2 en 1
Deux sources laser

Deux technologies laser en un système évolué : Er:Y AG et Nd:YAG

Deux lasers sont au cœur des systèmes Dynamis, avec deux longueurs d'onde complémentaires : le laser Nd:YAG est doté de la pénétration la plus homogène pour les traitements thermiques en profondeur d'une grande efficacité, et le laser Er:YAG est équipé de la plus haute absorption pour les traitements superficiels ablatifs et non ablatifs.

**Combinaison
de longueurs
d'onde de qualité
supérieure
pour toutes les
applications
majeures**

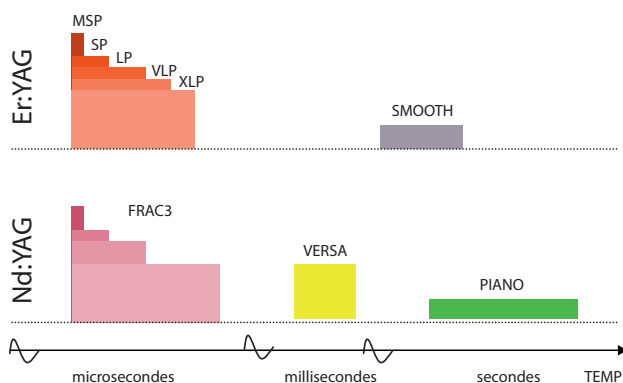

**Modes d'impulsions
innovateurs pour une
performance supérieure :
SMOOTH, FRAC3 et PIANO**



e de pointe

chnologie brevetée à impulsions carrées variables



La technologie ICV de Fotona permet d'obtenir des durées d'impulsions variables (de la microseconde à une durée supérieure à la seconde) pour optimiser l'effet du laser sur le tissu.


Les deux sources laser utilisent la technologie ICV (impulsions carrées variables) brevetée de Fotona qui permet d'accéder à un éventail de modes de traitement sans précédent : des impulsions microseconde extrêmement courtes pour cibler intensément des zones sélectionnées aux impulsions très longues (d'une durée inférieure à la seconde ou d'une seconde) pour les traitements uniformes, constants et plus délicats des tissus.

POURQUOI LA COMBINAISON DES LASERS ER:YAG ET ND:YAG?


Comparativement aux autres technologies laser, le laser Er:YAG de Dynamis, doté de la fonction ICV (impulsions carrées variables), permet l'ablation de la peau avec plus de précision. L'énergie du laser Er:YAG est fortement absorbée dans l'eau (le chromophore principalement ciblé lors du resurfaçage de la peau) et peut donc vaporiser la peau au micron près, avec très peu de conduction thermique. Ceci a pour effet de réduire au minimum les effets indésirables, tels que l'hypopigmentation et les érythèmes persistants, ainsi que les délais de rétablissement. Dans les systèmes de Dynamis, le laser Er:YAG avec ICV peut être réglé pour varier entre des indices thermiques « chauds » et « froids », et ablatifs à non ablatifs, avec une grande précision. L'adaptabilité complète de ce produit vous permet d'atteindre les résultats cliniques exacts que veulent vos patients.

Le laser Nd:YAG complète parfaitement l'action ablatif du laser Er:YAG grâce à sa capacité de pénétrer profondément dans la peau pour produire des effets thermiques sans endommager la surface de la peau. Son absorption homogène dans la peau et sa faible absorption par la mélanine permettent une utilisation sans danger sur tous les types de peau. Par rapport aux technologies classiques, les impulsions produites par le laser Nd:YAG avec ICV de Dynamis produisent des augmentations de température de type FRAC3® virtuellement instantanées et limitées exclusivement aux structures ciblées.


Technologie ICV brevetée pour une plus grande gamme de modes de traitement

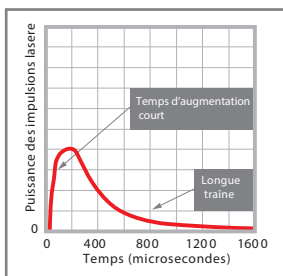

Technologie laser standard

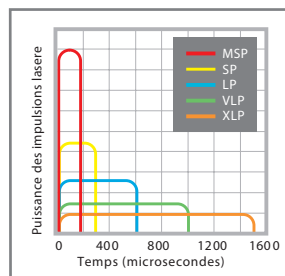

Technologie ICV de Fotona

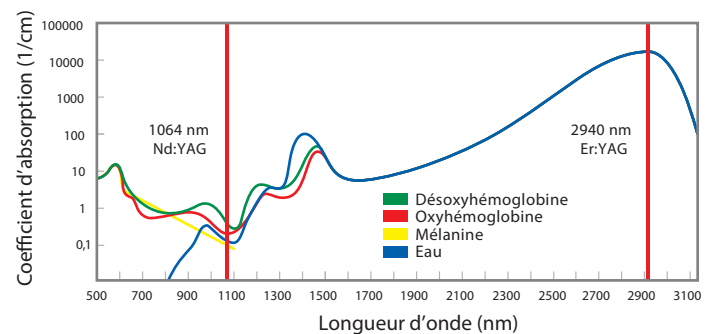

LES MEILLEURES LONGUEURS D'ONDE

"En matière de traitements laser, Er:YAG et Nd:YAG de Dynamis constituent, pour moi, les meilleures longueurs d'onde si l'on souhaite réduire au minimum les complications et raccourcir les délais de rétablissement, tout en fournissant des résultats cliniques exceptionnels." **C. Pidal, Argentine**

Le choix vous

La plus grande gamme

La gamme Dynamis consiste en cinq systèmes différents : SP Dynamis, SP Spectro, XS Dynamis, XP Spectro et XP Dynamis.

Traitements principaux

- Acné et révision de cicatrices d'acné
- Onychomycose
- Veines Lésions pigmentaires
- Révision de cicatrices
- Resurfaçage cutané
- Rajeunissement de la peau non ablatif
- Rajeunissement de la peau ablatif
- Traitements fractionnels
- Verrues
- Lésions vasculaires
- Traitements fractionnels et à pleine puissance
- Épilation
- Gynécologie
- Ronflement
- Élimination des lésions bénignes
- Applications chirurgicales : lipolyse laser, EVLA (ablation endoveineuse au laser) et hyperhidrose



as est offert m m e d ' a p p l i c a t i o n s

Options personnalisables avec la gamme Dynamis



	Épilation	Veins	Rides	Rajeunissement de la peau	Lésion bénigne	Onychomycose	Lésions vasculaires	Resurfaçage cutané	Resurfaçage fractionnel de la peau	Cicatrices	Acné active	Lésions pigmentaires	Verrues	Gynécologie	Ronflement	Lipolyse et hyperhidrose	EVLA
SP Dynamis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SP Spectro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
XS Dynamis			•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		
XP Spectro	•	•	•	•		•	•				•		•			•	•
XP Dynamis	•	•	•	•		•	•				•		•			•	•

	VERSA	FRAC3	PIANO	S-11 scanner	QCW	F-22 scanner	SMOOTH mode	Gynecology	Surgery
SP Dynamis	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SP Spectro	•	•	*	•	*	•	•	•	•
XS Dynamis						•	•	•	
XP Spectro	•	•	*	•	*				•
XP Dynamis	•	•	•	•	•				•

* En option avec Spectro

GAMME DE MODÈLES DYNAMIS ET SPECTRO

Modèle	SP Dynamis / SP Spectro	XS Dynamis	XP Dynamis / XP Spectro
Type de laser	Er:YAG	Nd:YAG	Er:YAG
Longueur d'onde	2940 nm	1064 nm	2940 nm
Puissance	20 W	80 W / 35 W	20 W
Énergie	3 J	50 J	3J
Scanner	S22 (S-Runner)	S-11	S22 (S-Runner)
Modalités	MSP, SP, LP, VLP, XLP SMOOTH, TURBO	LP, FRAC3* QCW*, PIANO*	MSP, SP, LP, VLP, XLP SMOOTH, TURBO

STATION DE TRAVAIL HAUTEMENT INNOVATRICE

“Le laser Dynamis de Fotona est une station de travail hautement innovatrice représentant une solution complète de resurfaçage ablatif de la peau, capable d’offrir un large éventail d’options thérapeutiques.”


Ming-Li Tseng, Taiwan

Simple à Avec écran tactile


Caractéristiques principales

- Simple à utiliser, l'interface utilisateur intuitive place une gamme complète d'applications au bout de vos doigts
- Des centaines de préréglages avec un mode supplémentaire destiné aux spécialistes
- L'interface utilisateur vous guide intelligemment à travers toutes les applications


1. Sélectionnez une longueur d'onde

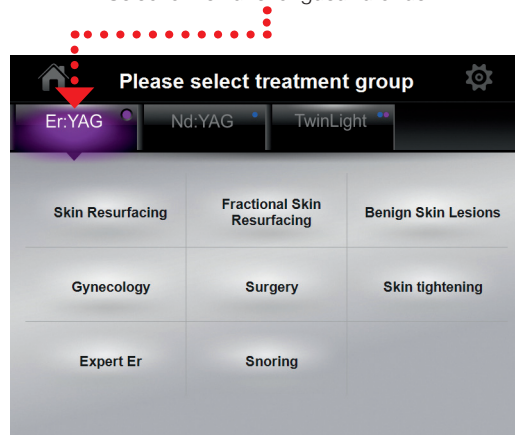


2. Sélectionnez un groupe d'applications

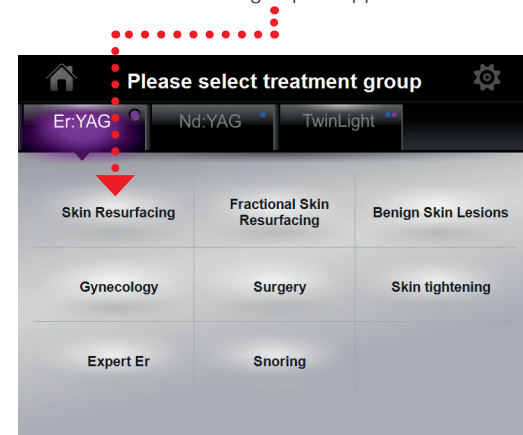

3. Sélectionnez un type de traitement

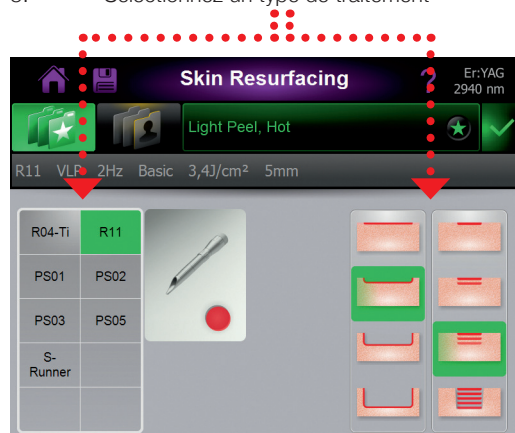

4. Appuyez sur OK et procédez

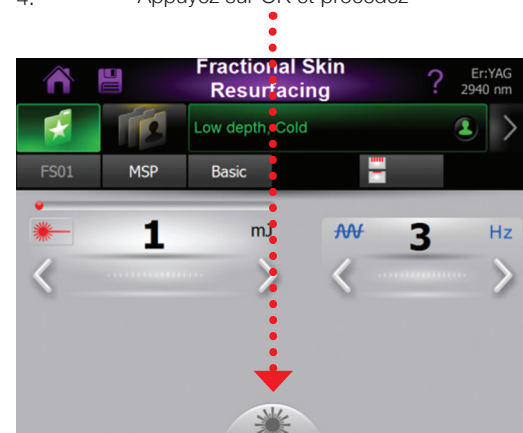

u t i l i s e r

t i l e i n t u i t i f





La beauté et le f

P o u r u n e p é n é t r a t i

Principaux avantages

- Pénétration ultra profonde
- Sans risque pour tous types de peaux
- Haute fiabilité

Polyvalence extrême des traitements avec des impulsions diverses

- **Versa**
- **FRAC3® & Avalanche FRAC3®**
- **PIANO®**
- **QCW**

faisceau Nd:YAG



ion ultra profonde



Le laser Nd:YAG se caractérise par sa pénétration homogène jusqu'à dix millimètres de profondeur et une absorption sélective par les chromophores tissulaires. Ces deux caractéristiques permettent à la lumière du laser Nd:YAG d'atteindre les structures cutanées profondes sans léser l'épiderme, quel que soit le type de peau.

SCANNER S-11

- Hautes fréquences d'impulsions pour une vitesse accrue
- Balayage contrôlé par ordinateur de surfaces allant jusqu'à 42 cm² selon 3 profils de balayage différents, pour une couverture parfaite de la peau et un confort optimal pour les patients
- Trois tailles de point différentes pour une précision de traitement supérieure

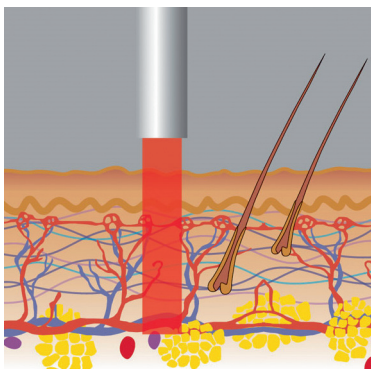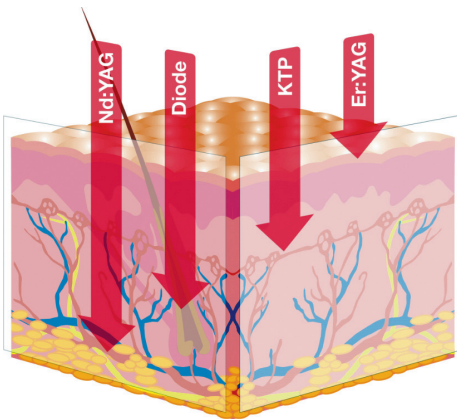

EFFICACE ET FIABLE


"Les avantages du laser Nd:YAG peuvent être résumés comme suit : efficace, rapide, fiable, excellent rapport qualité/prix et aucun consommable superflu. Nos patients sont très satisfaits de ce traitement, car il est sans danger, efficace, rapide et simple."

R. Gansel, Allemagne


Versa LP Sécurité et efficacité

Traitements principaux

- Veines
- Lésions vasculaires
- Acné
- Verrues
- Onychomycose
- Rajeunissement de la peau

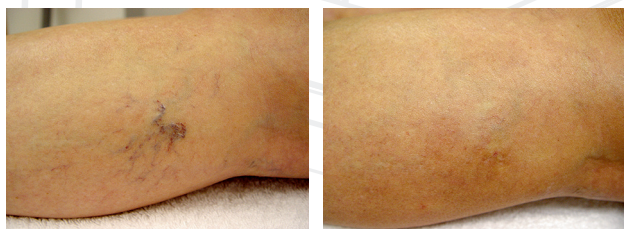

Veines de la jambe, avec l'autorisation de R. Sult

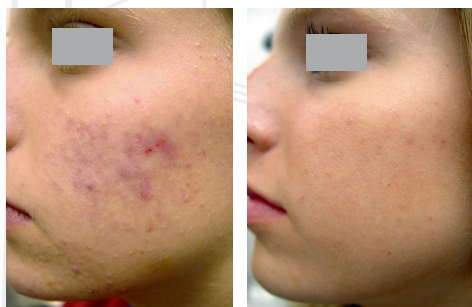

Acné active, avec l'autorisation de R. Sult



en une impulsion Nd:YAG milliseconde

MatrixView™

Système de détection thermique dans un embout à main, pour une sécurité et une précision supérieures.

R33 T


Points de 2 à 10 mm, MatrixView™

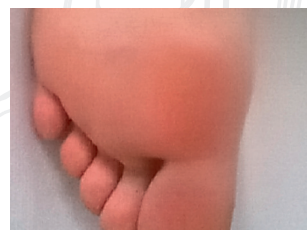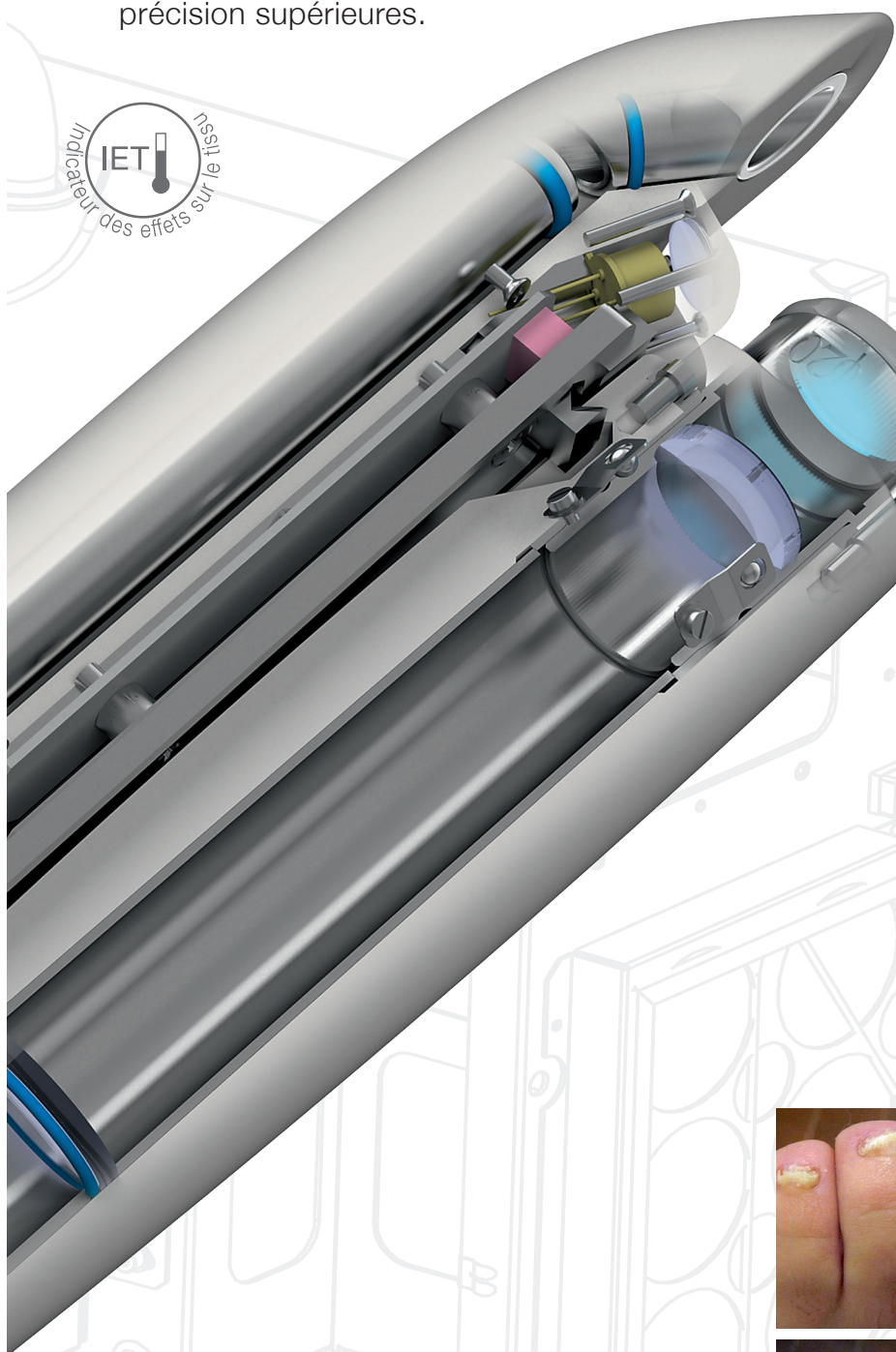

Verrues, avec l'autorisation de K. Semprimoznik



Onychomycose, avec l'autorisation de J. Kozarev

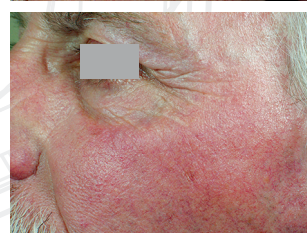

Télangiectasie, avec l'autorisation de R. Sult

FRAC3® Impulsions microsecon

FRAC3


est une nouvelle modalité auto-induite et non ablative de fractionnement tridimensionnel destinée aux traitements cutanés. FRAC3 utilise les impulsions de courte durée et la forte densité des puissances de crête de l'IVC produites par les impulsions du laser Nd:YAG pour créer un motif fractionnel en trois dimensions au niveau de l'épiderme et du derme, avec des îlots lésionnels principalement situés dans les zones des imperfections cutanées ciblées.



Épilation, avec l'autorisation de R. Sult

Traitements principaux

- Rajeunissement de la peau
- Épilation

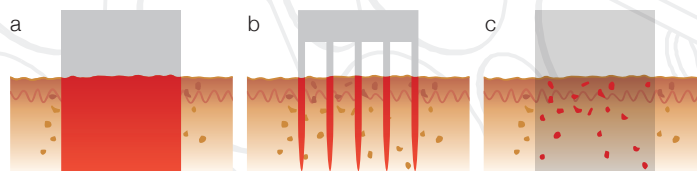

Traitements ciblés à l'aide d'îlots lésionnels créés par le laser :

- a) traitement laser standard uniforme;
- b) traitement laser standard en deux dimensions;
- c) nouveau traitement laser FRAC3® auto-induit en trois dimensions


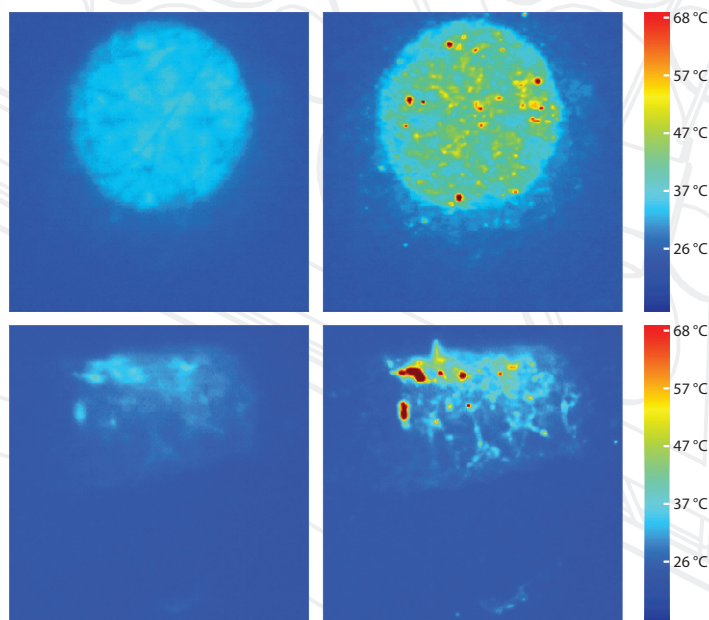


Image thermique de la surface de la peau suite à une longue impulsion et à une impulsion FRAC3® avec le laser Nd:YAG. Le fractionnement auto-induit de la température peut être observé après un traitement par des impulsions FRAC3®.

nde pour un effet 3D auto-induit



Resserrement fractionnel de la peau, avec l'autorisation de R. Gansel

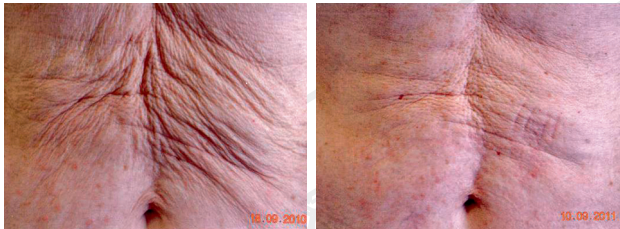


Épilation, avec l'autorisation de A. Desai


FRAC3® Avalanche : la technologie laser d'excellence pour l'épilation

L'ÉPILATION AU LASER FRAC3 AVALANCHE


est basée sur le phénomène d'amélioration de l'absorption de la lumière laser par les poils suite aux administrations successives de l'impulsion laser FRAC3®. La méthode Avalanche améliore l'efficacité des techniques actuelles d'épilation, réduit l'inconfort des patients et, dans la majorité des cas, élimine le recours au refroidissement cutané.

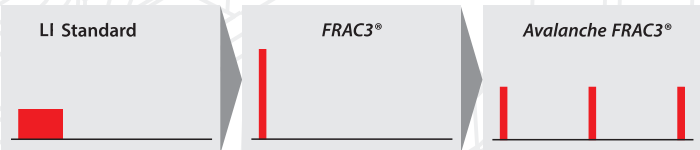

L'évolution des protocoles d'épilation au laser Nd:YAG. La meilleure technique d'épilation, le laser LI (longue impulsion) standard, a été détrônée par le protocole FRAC3®, qui a été amélioré davantage en prenant compte de l'effet avalanche reposant sur l'augmentation de la température des impulsions laser FRAC3® administrées de façon ultérieure.

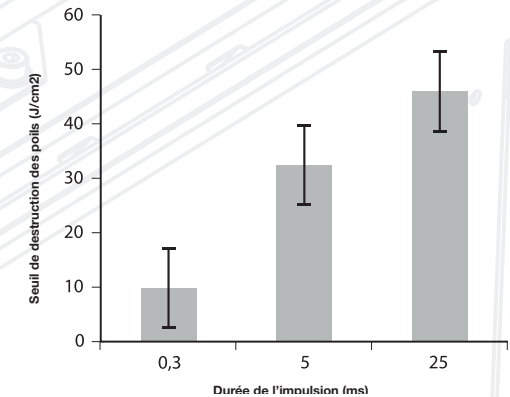

Dépendance mesurée du seuil de destruction des poils (défini par la plus faible fluence à laquelle la destruction des poils est visible) sur la durée de l'impulsion avec le laser Nd:YAG.

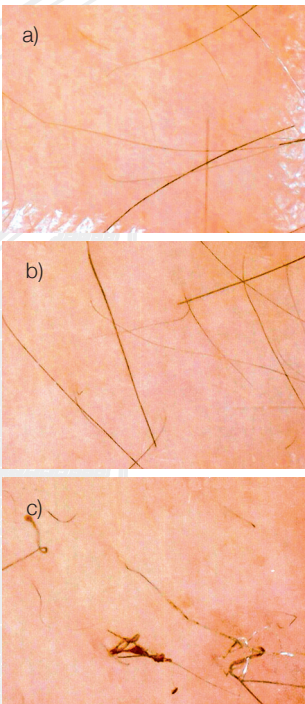

a) Poils avant l'irradiation laser;

b) Poils irradiés avec le laser Nd:YAG à longue impulsion; aucun changement visible;

c) Poils irradiés avec le laser Nd:YAG à impulsion FRAC3®; les poils sont carbonisés et noircis.

PIANO Soyez synchroni



Principaux avantages

- Conçu pour des traitements photothermiques homogènes du derme
- Prévu pour contourner la forte absorption par l'épiderme

R34 T

Points d'une taille de 15 à 20 mm, MatrixView™




QCW Créez des silhouettes

Principaux avantages


- Traitements rapides et efficaces
- Délais de rétablissement réduits de manière significative
- Pour le modelage de la silhouette
- Traitements anti-âge de l'intérieur vers l'extérieur :
 - **Lipolyse laser**
 - **Traitements endovasculaires**
 - **Hyperhidrose**



isé avec le mode PIANO

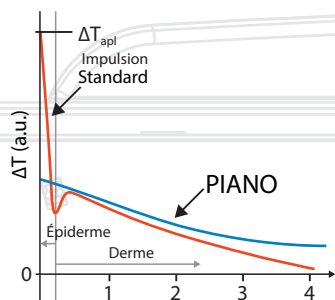

PIANO, est un nouveau mode ultra long qui prolonge la durée des impulsions du laser Nd:YAG à l'échelle des secondes. Cette durée est supérieure au temps de relaxation thermique de l'épiderme ou de toute autre structure de la peau, mais ne provoque pas de pics initiaux de température au niveau de l'épiderme. Il est donc indiqué pour les traitements où l'on souhaite chauffer le derme de façon uniforme et constante (bulk heating).

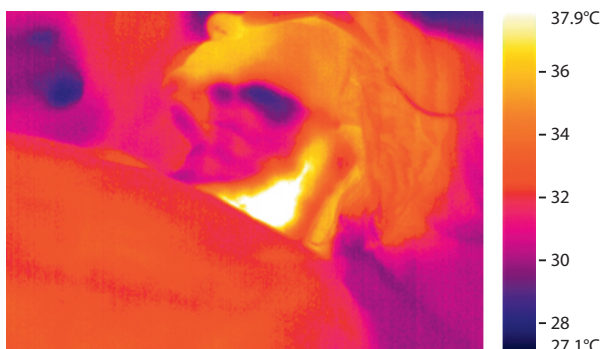

Chauffage uniforme, constant et contrôlé



Resserrement de la peau avec le mode PIANO, avec l'autorisation de M. Taylor



Resserrement de la peau avec le mode PIANO, avec l'autorisation de M. Taylor


avec le QCW chirurgical



Lipolyse laser, avec l'autorisation de D. Maletic



EVLA (ablation endoveineuse au laser), avec l'autorisation de A. Sikovec

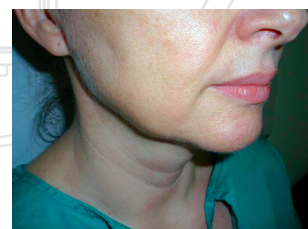

Resserrement interstitiel du menton, avec l'autorisation de D. Maletic



La beauté et le f

P o u r u n e a b s o r p

Caractéristiques principales

- Absorption supérieure
- La technique d'ablation la plus efficace
- IVC pour contrôler l'indice d'ablation/ de coagulation
- Pour une ablation modérée (à froid) ou profonde (à chaud)
- Ablations fractionnelles à pleine puissance
- Modes TURBO et SMOOTH


Polyvalence des traitements

- **Pour des exfoliations en surface (à froid) ou profondes (tempérées)**
- **Traitements fractionnels**
- **Mode SMOOTH®**

faisceau Er:YAG

option supérieure


Le laser **Er:YAG** utilise une longueur d'onde optimale qui est absorbée par le tissu à une profondeur de quelques microns, ce qui empêche la lésion des tissus plus profonds. La technologie **IVC** vous permet d'ajuster facilement les paramètres du traitement laser afin de produire des impulsions microseconde courtes (MSP) ou des impulsions ultra longues (XLP) et ainsi d'équilibrer avec précision l'élimination de l'épiderme avec les effets thermiques sur le collagène.

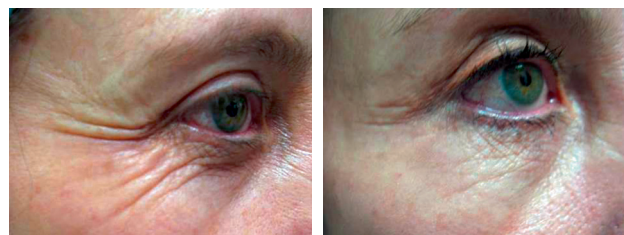


Rides péribuccales, avec l'autorisation de C. Pidal




Lésions bénignes, avec l'autorisation de O. Matyunin

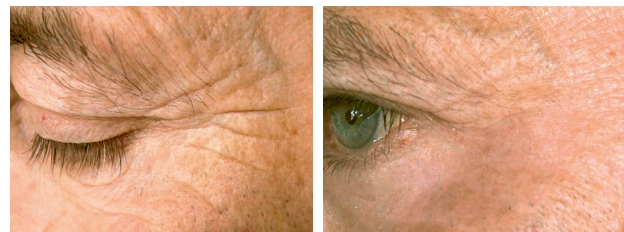

Rides péribuccales, avec l'autorisation de R. Sult

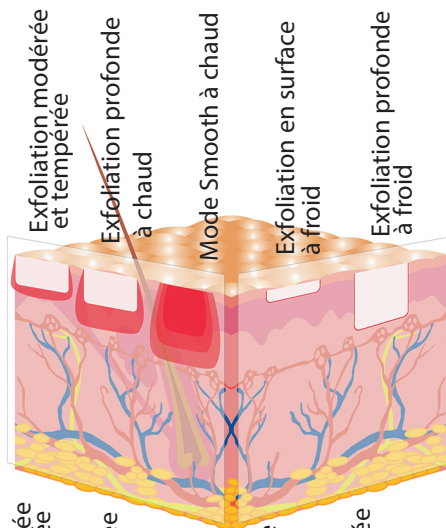

Sélection de différents schémas thérapeutiques disponibles avec le laser Er:YAG IVC

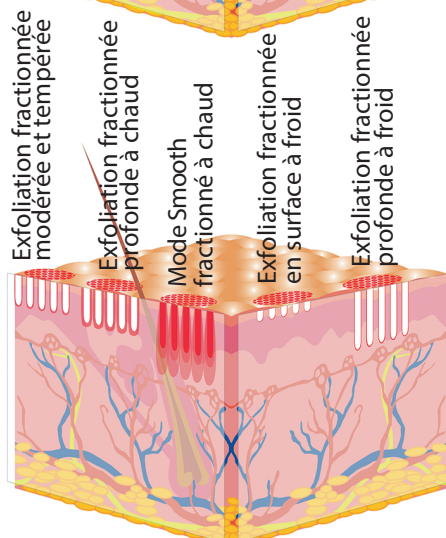

Sélection de différents schémas thérapeutiques fractionnels disponibles avec le laser

L'ÉQUILIBRE IDÉAL ENTRE EFFICACITÉ, TEMPS DE GUÉRISON ET RISQUES DE HPI

"Le laser Er:YAG de Dynamis est un instrument très efficace pour les traitements de resurfaçage, en termes d'équilibre entre l'efficacité, les temps de guérison et les risques de HPI (hyperpigmentation post inflammatoire)."

A.S.Lun, Hong Kong

Traitement fractionnel au


Les embouts à main **fractionnels** sont basés sur le concept qu'une matrice de plaies microscopiques se forme à la surface de la peau et qu'elle est rapidement réépithélialisée par les tissus environnants non lésés, épargnant ainsi l'épiderme des zones non traitées.

Principaux avantages

- Resurfaçage moins invasif de la peau
- Accélération du rétablissement
- Guérison des plaies améliorée
- Guérison des cicatrices supérieure


F-RUNNER

- Balayage contrôlé par ordinateur
- Précision et uniformité incomparables sur de grandes surfaces
- Traitements fractionnels intenses
- Taille des points de 250 µm
- Taille du champ de balayage ajustable

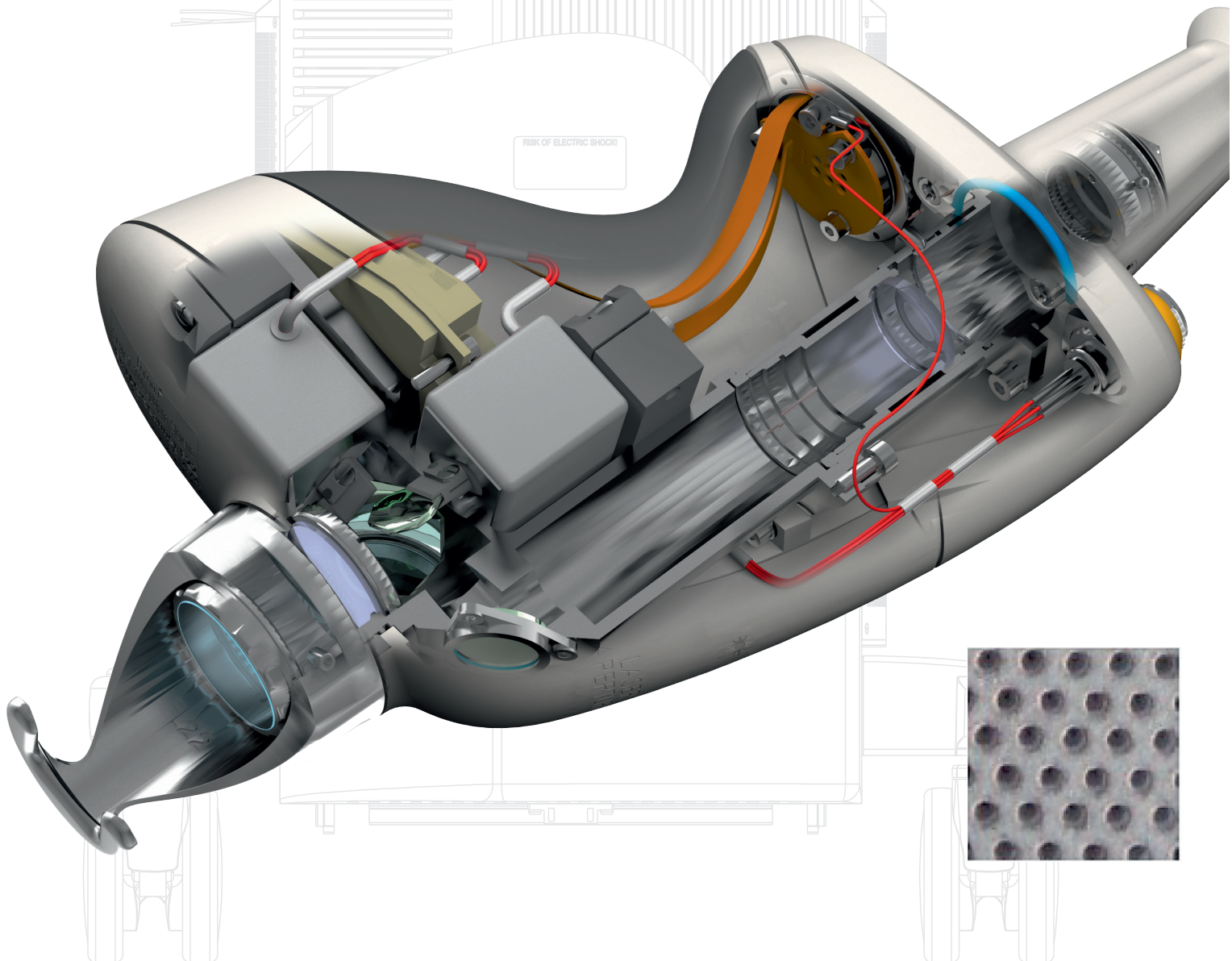


Le laser Er:YAG avec IVC

Pour en faire plus avec moins

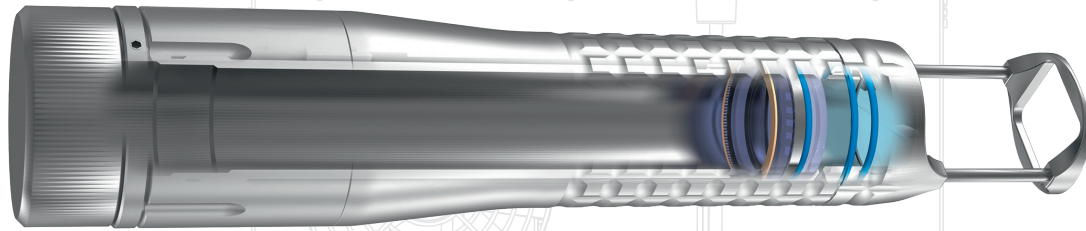


FS01

- Traitements fractionnels de précision
- Taille des points de 250 μm
- Traitements rapides de tamponnage

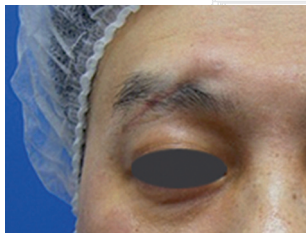

Révision de cicatrice, avec l'autorisation de A. Au

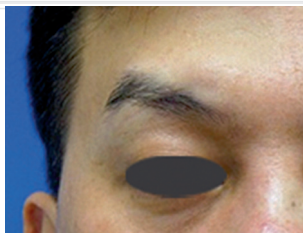


Rides péribuccales, avec l'autorisation de F. Paciolla



Révision de cicatrice, avec l'autorisation de H. M. Omparkash



Cicatrices d'acné, avec l'autorisation de Y. Targonskaya

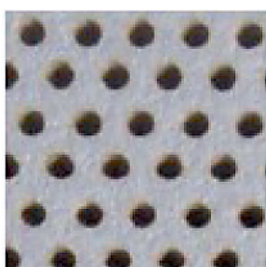


Le mode **TURBO** est une technologie unique de séquençage des impulsions identiques au sein du même point de traitement de la peau, ce qui augmente la profondeur d'ablation et crée des micro-canaux plus précis et mieux définis.

Mode SMOOTH® **Travaillez**

Une fonction unique non ablativ du laser Er:YAG avec IVC pour les traitements non invasifs et uniquement thermiques.

Le mode **SMOOTH**® est non ablatif et ne provoque pas de saignement. Il traite la peau en douceur, comme une plume, par l'application d'une température contrôlée avec précision. L'énergie optique est transmise en une séquence unique de longues impulsions inférieures à la seconde. Ceci empêche l'accumulation de température à la surface et permet de chauffer le tissu de façon homogène dans un rayon de plusieurs centaines de micromètres.

Impulsions en mode SMOOTH

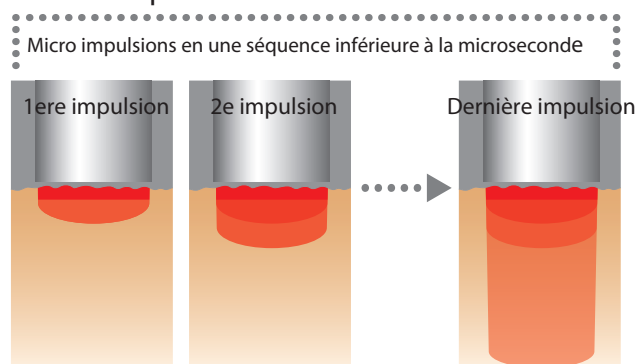

Traitement thermique non ablatif sans risque de saignement ou de lésion des tissus plus profonds

IDÉAL POUR LE RESSERREMENT DE LA PEAU PAR TRAITEMENT NON ABLATIF AU LASER ER:YAG


Le mode SMOOTH permet un remodelage non ablatif de la peau au laser, fondé sur l'induction contrôlée de la lésion thermique du collagène, tout en préservant l'épiderme. Outre un effet immédiat produit par le rétrécissement des fibres collagènes, la néocollagénèse produite entraîne la formation de nouveau collagène. On obtient ainsi un resserrement et une amélioration de l'élasticité du tissu traité.



Resserrement intrabuccal, avec l'autorisation de A. Gaspar




Resserrement de la peau, avec l'autorisation de A. Gaspar

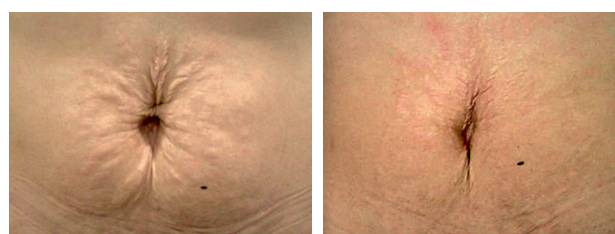


Resserrement de la peau, avec l'autorisation de C. Pidal

z en douceur avec le mode Smooth

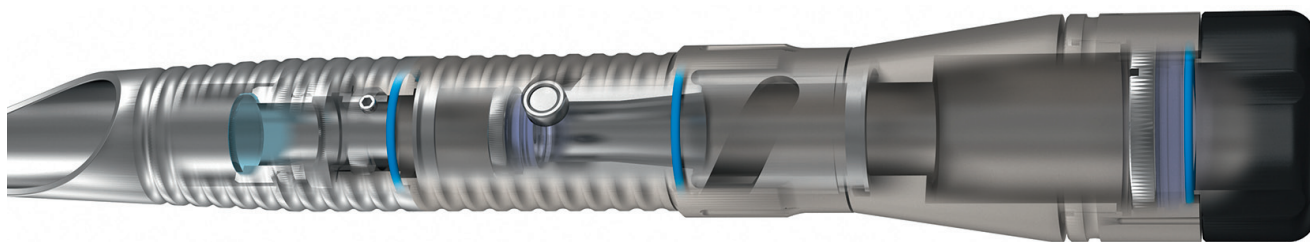

PS03



Motifs de 2 à 7 mm
pour le mode SMOOTH

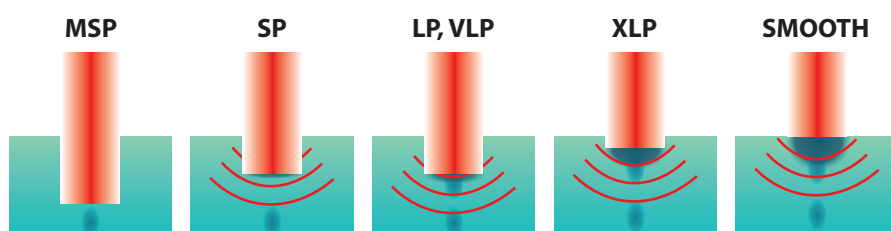

Dans les systèmes de Dynamis, le laser Er:YAG avec ICV peut être réglé pour varier entre des indices thermiques « chauds » et « froids », et ablatifs à non ablatifs, avec une grande précision.

Traitements en douceur du ronflement au laser Er:YAG avec IVC

- Un traitement uniquement thermique et non invasif, tout en douceur, de réduction du ronflement
- Aucune douleur, aucune anesthésie requise

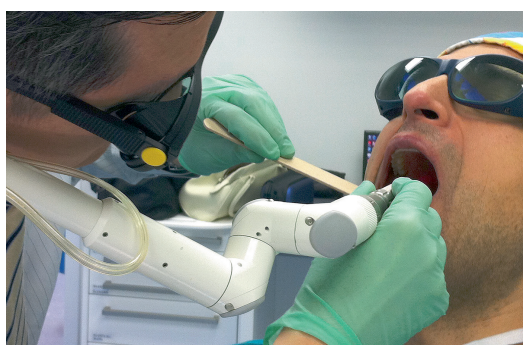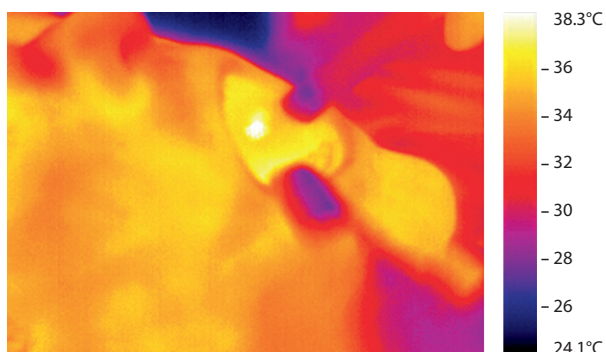

Les traitements au laser


Er:YAG avec IVC en mode pour la gynécologie

Traitements principaux

- Traitements gynécologiques peu invasifs en mode SMOOTH
- Incontinence urinaire d'effort
- Traitement du relâchement vaginal

IncontiLase®

- traitement laser de l'incontinence urinaire d'effort et mixte, légère ou modérée
- resserrement photothermique de la région urétrale et de la paroi vaginale antérieure

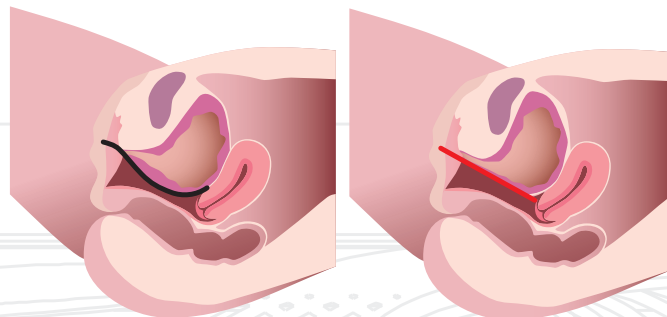

Les études cliniques confirment que IncontiLase est une option thérapeutique efficace, sûre et confortable pour le soulagement des symptômes des patients souffrant d'incontinence urinaire d'effort et mixte, légère ou modérée.

Double longueur d'onde TwinLight™

Supérieur sur les plans

TRAITEMENTS SYNERGIQUES AVEC DEUX LONGUEURS D'ONDE À ACTION COMPLÉMENTAIRE


La méthode TwinLight® combine deux fonctions laser fractionnelles complémentaires en un seul traitement synergique. Dans un premier temps, la peau est soumise à un traitement photothermique au laser Nd:YAG à impulsion FRAC3®, puis, lors d'une deuxième étape, un traitement fractionnel au laser Er:YAG est administré.

Sur les plans clinique et histologique, cette méthode combinée s'est avérée supérieure au resurfaçage fractionnel à longueur d'onde unique (2940 nm).


MEILLEURES POSSIBILITÉS POUR LES PATIENTS

"Pour moi, les traitements laser ne concernent pas uniquement les longueurs d'onde, la durée d'impulsion ou la fluence, mais aussi la possibilité d'une manipulation positive et sophistiquée pour l'amélioration de notre santé."

J. Kozarev, Serbie

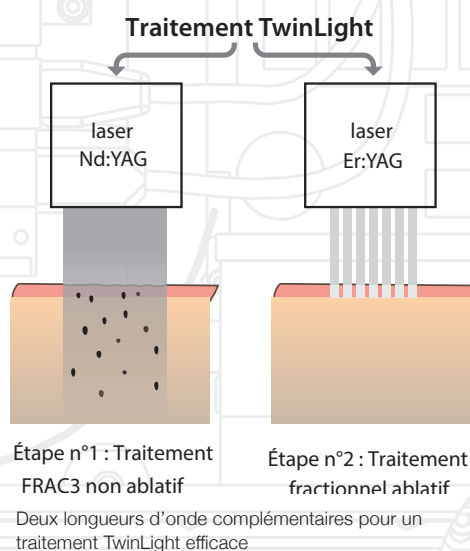

r ode SMOOTH, doux comme une plume,

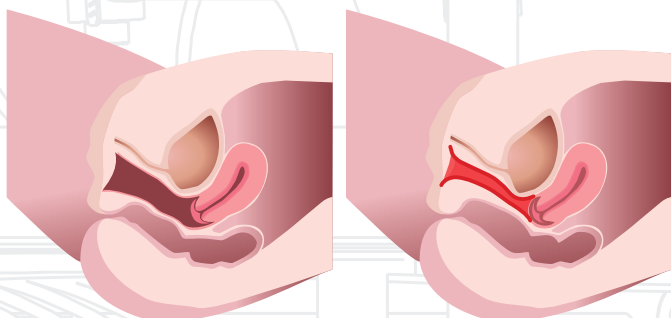


Les résultats des études scientifiques démontrent clairement de grandes améliorations de la fermeté vaginale et de la satisfaction sur le plan sexuel.

IntimaLase®

- Rétractation vaginale au laser par resserrement photothermique du canal vaginal


s clinique et histologique pour le surfaçage de la peau

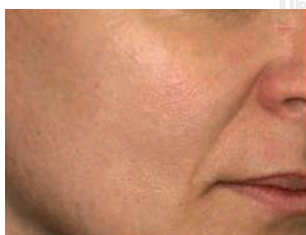


Jour 0




Jour 30

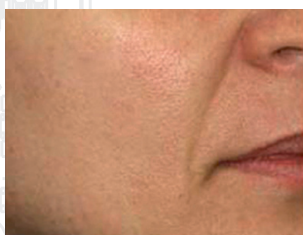


Jour 60

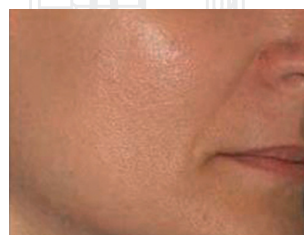

Jour 90 après le traitement TwinLight

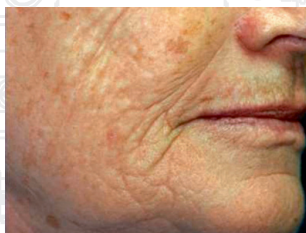

Avant

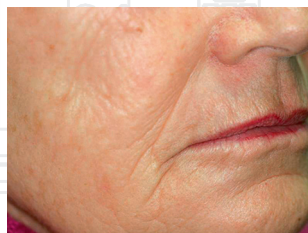

Jour 90 après le traitement TwinLight

Avec l'autorisation de L. Marini

Ciblez des applications spécifiques grâce à la ga

Er:YAG



PS01, MSP-XLP
et SMOOTH à
motifs



PS02,
MSP-XLP et
SMOOTH à
motifs



PS03, 2 à 8
mm, MSP-XLP
et SMOOTH à
motifs



R04, 2 à 12
mm, MSP-XLP
et SMOOTH
à pleine
puissance



R11, 2 à 7 mm,
MSP-XLP et
SMOOTH à pleine
puissance




FS01 et MSP-
XLP fractionnels



F-Runner et
MSP-XLP



S-Runner,
MSP-XLP et
SMOOTH

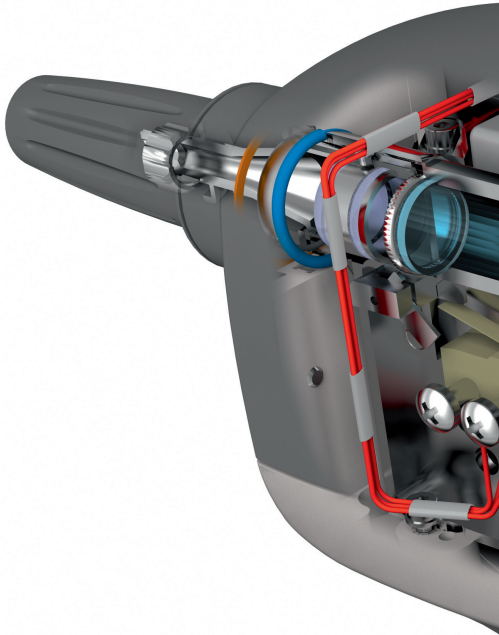

gamme impressionnante d'accessoires de pointe



G-set et
SMOOTH

Nd:YAG



R33 (2 à 10 mm)
VERSA, FRAC3 et
PIANO




R33 (15 à 20 mm)
VERSA, FRAC3
et PIANO



R31
(grossissement de
2 à 8 mm) VERSA,
FRAC3 et PIANO



R27 et QCW
chirurgicaux

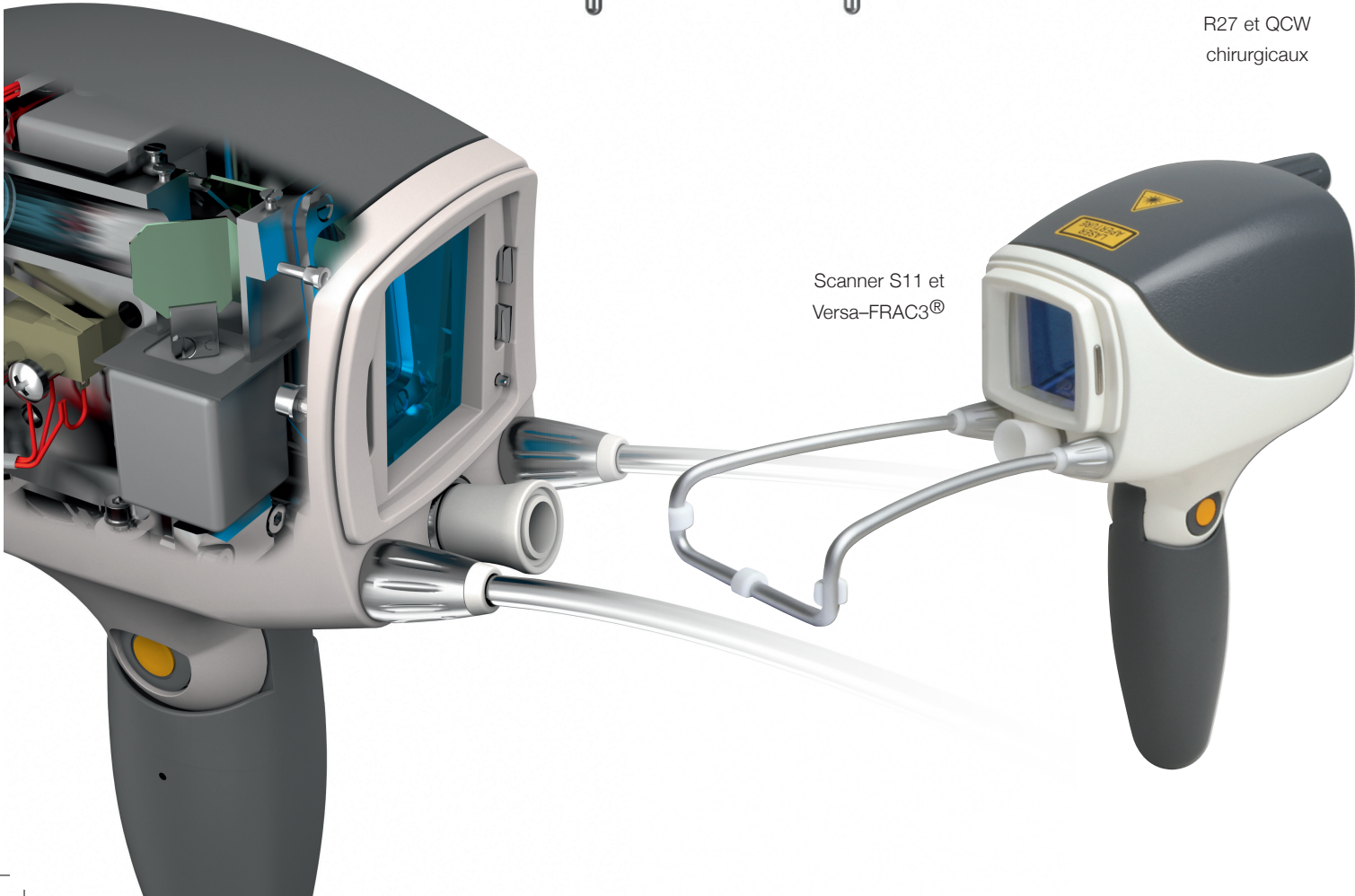

Scanner S11 et
Versa-FRAC3®

DUPUIS 1964

Grâce à ses 50 ans d'expérience, Fotona a inspiré certaines des technologies les plus avancées au monde ayant des applications esthétiques multiples. Au cœur des lasers à usage médical de Fotona se trouvent des sources laser à cristaux à l'état solide produisant des longueurs d'onde dont l'effet thérapeutique est le plus efficace dans le secteur. Ces longueurs d'onde « de référence » conviennent de façon idéale à la manipulation d'une gamme exceptionnelle de traitements cliniques et de soins esthétiques. Les embouts à main, les modes de fonctionnement innovants et les technologies avancées des profils de faisceau brevetés de Fotona améliorent davantage ces longueurs d'onde à usage médical pour assurer une performance et une efficacité maximales.



Fotona, LLC
info@t4med.com
1241 Puerta Del Sol,
San Clemente, CA 92673, USA
phone: 949.276.6650

Fotona, d.d.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenia
info@fotona.com
www.fotona.com

L'homologation des dispositifs
peut varier d'une région à
l'autre. Veuillez contacter le
distributeur de votre région
pour confirmer le statut de
votre dispositif.

Fotona
choisissez la perfection

CE
0123

ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003,
MDD 93/42 EEC Annex II excluding
(4), ISO 13485:2003 (CMDCAS).

