

tixel[®]

Évalué par les pairs, résultats éprouvés
Rajeunissement Cutané Fractionné






Tixel est un système de rajeunissement cutané fractionné conçu pour traiter les affections tenaces de la peau (rides des lèvres et autres ridules), ainsi que les zones délicates comme les paupières, le cou et les mains. Grâce à la technologie Thermo-Mechanical Action® (chaleur contrôlée avec précision), des résultats remarquables peuvent être obtenus simplement en appliquant une pointe en titane brevetée sur les zones ciblées. La peau devient plus lisse, plus ferme et visiblement rajeunie.

Cette technologie sophistiquée convient à tous les types de peau et à tous les âges, et peut être utilisée en toute sécurité tout au long de l'année, quel que soit le climat.




Embouts
en titane

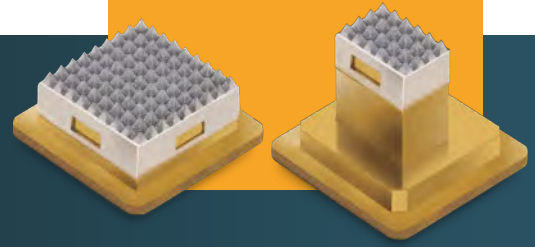


Comment fonctionne Tixel:

La pointe en titane est chauffée à une température précise grâce à l'énergie thermique. Ensuite, la pièce à main est déplacée sur les zones à traiter, entrant brièvement en contact avec la peau pour assurer une couverture uniforme. La quantité d'énergie transférée dépend du temps d'exposition de la pointe sur la peau : plus la durée de l'impulsion est longue, plus l'énergie transmise est importante. Cela déclenche une cascade de régénération : production de nouveau collagène, d'élastine, de fibroblastes, et bien plus encore.


Durée d'impulsion

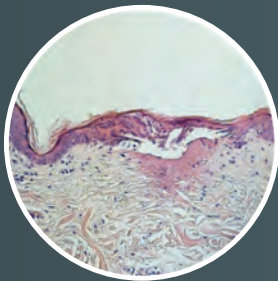

COURTE : 6-8 ms

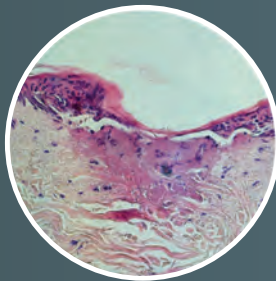

MOYENNE : 10-12-14 ms

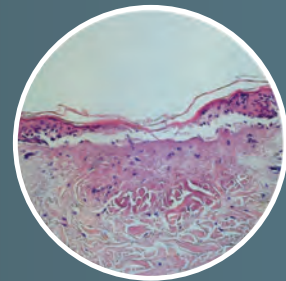

LONGUE : 16-18 ms

Après le traitement, les patients peuvent s'attendre à :

- ✓ Une légère enflure et une peau rosée pendant 3 à 4 heures
- ✓ Un érythème léger et une sensation de chaleur pendant 2 à 3 heures
- ✓ Un temps de récupération de 0 à 2 jours, selon l'intensité du traitement
- ✓ Une micro-croûte qui disparaît en environ 3 jours

La simplicité et l'élégance de Tixel sont incontestables

Simplicité

- ✓ Pas d'anesthésie ; Utilisation facultative de crèmes analgésiques
- ✓ Douleur faible
- ✓ Non invasif, sans saignement
- ✓ Temps de récupération minimal (0 à 2 jours pour la plupart des patients)
- ✓ Aucune protection oculaire requise pour le patient ou le praticien

Élégance

- ✓ Traite les affections cutanées de la tête aux pieds
- ✓ Convient à tous les types de peau et à tous les âges
- ✓ Utilisable toute l'année, même en été
- ✓ Sans émission de radiation, sûr et facile pour les patients et les praticiens


Résultats avant et après




5 traitements Tixel



3 traitements Tixel

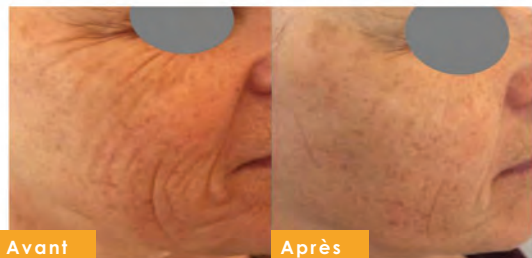

3 traitements Tixel
Paramètres de traitement : 8-400, 10-500, 12-400

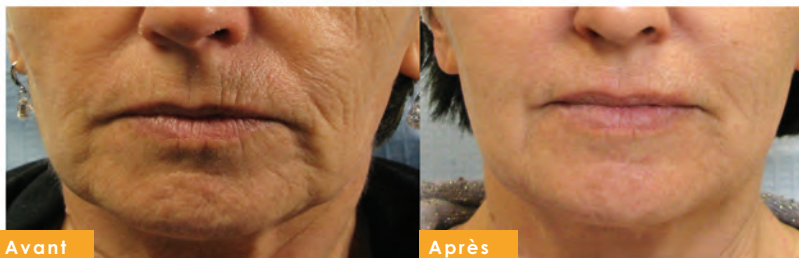

3 traitements Tixel
Paramètres de traitement : 14-700



Zones de traitement

— Rides du front (rides d'inquiétude)

— Rides du lion (rides glabellaires)

— Rides des paupières

— Pattes-d'oie (rides périorbitaires)

— Boursouflures sous la paupière inférieure (festoons)

— Rides du sourire (sillons nasogéniens)

— Rides des lèvres

— Menton plissé

— Rides du cou

— Bras

— Décolleté (poitrine)

— Vergetures

— Mains

— et plus






TROUVEZ VOTRE SOLUTION IDÉALE

Découvrez comment le Tixel C classique se compare au Tixel 2 de nouvelle génération
— Choisissez celui qui trouvera parfaitement sa place dans votre salle de traitement.

Caractéristiques et fonctionnalités



Simultanément préchauffé et prêt	2	1
Mode répétition	Oui	N/A
Remplacement à chaud des pièces à main	Oui	N/A
Compatible avec la Grande pièce à main	Oui	Oui
Compatible avec la pièce à main de Précision	Oui	Oui
Temps de démarrage	-3 minutes	6 minutes
Refroidissement (Arrêt)	-3 minutes	6 minutes
Indications à l'écran pour l'utilisateur	Affichage interactif en plein écran	Icône clignotante
La plus petite pièce à main Précision est incluse, pour un traitement ciblé et sûr des zones délicates, telles que le contour des yeux et de la bouche, ainsi qu'une seconde pièce à main conçue pour les zones de traitement plus étendues.	Oui	N/A (Pièce à main Précision disponible à l'achat séparément)

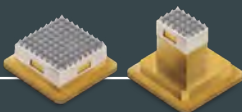

Les utilisateurs doivent toujours consulter le manuel d'utilisation pour connaître les réglages recommandés.
Tixel, Tixel 2, Thermo-Mechanical Action et Novoxel, Simple Élégance sont toutes des marques déposées de Novoxel Ltd.
© 2024 Novoxel Inc. Tous droits réservés.

Contactez-nous: www.clarionmedical.com info@clarionmedical.com [@Clarion_medical](https://www.instagram.com/Clarion_medical)