

VX 40

Analyse détaillée
et automatique des
verres en 30 secondes



Analyse détaillée de tous les types de verres

La technologie Visionix Wavefront vous permet d'obtenir une analyse détaillée des verres d'un simple geste. Faites l'expérience de la prochaine génération de frontofocomètres avec le VX 40. Le VX 40 peut détecter et analyser les verres simples, bifocaux et progressifs et est compatible avec toutes les technologies et marques de verres.



Analyse et détection automatique des verres en 30 secondes

ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ

Le VX 40 offre une analyse des verres entièrement automatisée. Une fois la monture placée sur le support, l'opérateur démarre la mesure d'un simple geste.

FACILE D'UTILISATION

Grâce à son système unique de maintien de la monture, une seule main suffit pour utiliser le VX 40. Appuyez sur le bouton de démarrage et l'appareil réalisera automatiquement l'analyse du verre droit et du verre gauche.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DES VERRES



Le VX 40 détecte tous les types de verres unifocaux, bifocaux et progressifs. Il est compatible avec toutes les technologies et marques de verres.

ANALYSE DÉTAILLÉE

Grâce à sa technologie et à son interface intuitive, le VX 40 fournit une représentation détaillée de la variation de la puissance des verres.

COMPARAISON DES VERRES PROGRESSIFS

La fonction de comparaison des verres du VX 40 vous permet de visualiser facilement les différentes géométries de verres progressifs.

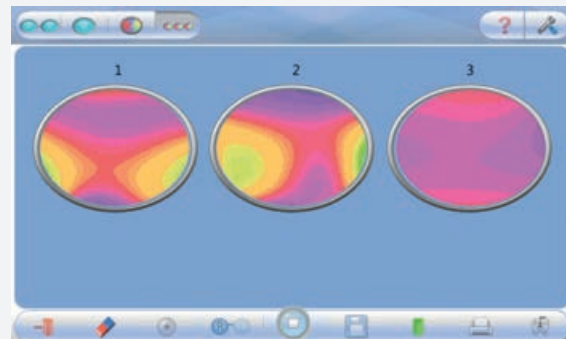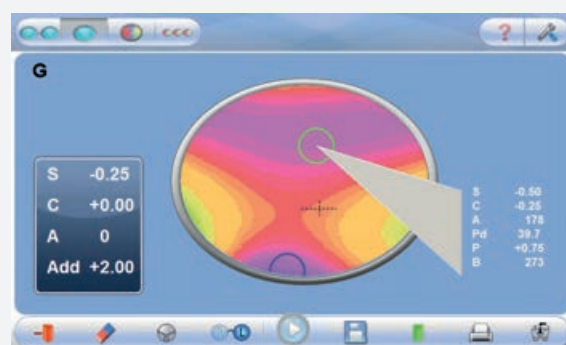

**Connectez-vous à la suite Visionix Digital
Refraction et autres appareils / EMR !**



**EHR/EMR
CAPABLE**

Spécifications techniques

DIMENSIONS :

LARGEUR	220 mm
PROFONDEUR	240 mm
HAUTEUR	455 mm
POIDS	9 kg
TENSION	115 V - 230 V 50 Hz - 60 Hz
NORMES	CE

VX 40	
PLAGES DE MESURES	
Nombre de points analysés	Jusqu'à 1 350
Sphère	-15 ~ +10D (pas de 0,01, 0,06, 0,125, 0,25D)
Cylindre	0-10D (pas de 0,01, 0,06, 0,125, 0,25D)
Axe	0-180° (pas de 1°)
Addition	0-± 3.5D (pas de 0,01, 0,06, 0,125, 0,25D)
Prisme	0-± 10 Δ (pas de 0,01 Δ)
Ecart pupillaire	Mono / Bino
Signe du cylindre	-, +
DONNÉES GÉNÉRALES	
Imprimante	Interne
Ecran	LCD/16M couleur, 7"
Source lumineuse	LED - 730 nm
Conditions de travail	10 à 40°C
Transfert de données	RS-232, Bluetooth



INNOVATION TO UNLOCK YOUR POTENTIAL

VISIONIX INTERNATIONAL SAS

An der Pönt 62 - 40885 Ratingen - Deutschland
Tel. +49 (0) 2102-482770 - Fax +49 (0) 2102-48277 77
contact-de@visionix.com

www.visionix.com

Distribué au Canada par



125 Fleming Drive
Cambridge, ON N1T 2B8
info@clarionmedical.com
1-800-668-5236
www.clarionmedical.com