

## À PROPOS D'ENDYMED MEDICAL

Constitué en 2007, Endymed Medical, ( ENDY : TASE), propose aux professionnels et au marché grand public, des systèmes de traitements médicaux esthétiques basés sur l'énergie

La technologie de RF 3DEEP® exclusive d'EndyMed, approuvée par la FDA, propose une solution fractionnelle non ablative, hautement efficace dans les domaines suivants : traitement des rides, traitement par microaiguilles à RF, raffermissement de la peau du corps et du visage, remodelage corporel, réduction de la circonférence et de la cellulite, traitement des cicatrices traumatiques et d'acné.

La technologie 3DEEP® unique et brevetée d'EndyMed génère une énergie de RF dans la peau à une profondeur de 3 couches sans douleur ou risque, pour réactiver la production naturelle de collagène afin d'éliminer les rides, remonter et raffermir la peau de façon visible.

Avec 6 générateurs de RF, 3DEEP® est la technologie la plus innovante, la plus récente et la plus cliniquement éprouvée disponible à ce jour. 3DEEP® génère une énergie focalisée dans la profondeur du derme avec un minimum de douleur ou de chaleur épidermique. 3DEEP® offre une pénétration cutanée en profondeur, peu importe la couleur de la peau.



**ENDYMED**<sup>TM</sup>  
3DEEP SKIN SCIENCE

EndyMed Medical  
790 Madison Avenue, Suite 402, New York, NY 10065, USA  
[www.EndyMed.com](http://www.EndyMed.com)

EMIPHY-FR

# La technologie Intensif




L'Intensif d'ENDYMED est la première technologie par micro-aiguilles à RF motorisée, non isolées et autorisée par la FDA à être mise en marché. Alimentée par la technologie de RF unique 3DEEPM<sup>®</sup> d'ENDYMED, l'Intensif se démarque des autres technologies de micro-aiguilles par son mode opératoire exclusif, doux et rapide.

- Le mouvement d'insertion des aiguilles en douceur est sans égal par rapport aux autres applicateurs de micro-aiguilles existants à ce jour, offrant un mode opératoire continu, rapide et sans douleur.
- Un système électronique sophistiqué minimise les dommages au niveau de l'épiderme tout en permettant un échauffement de tout le volume dermique.
- Les aiguilles plaquées or, non isolées, associées à la technologie exclusive d'impulsions en mode fractionné d'ENDYMED, génèrent davantage de chaleur dans le derme, de façon sécuritaire, pour un meilleur remodelage du collagène par rapport à l'échauffement, significativement plus élevé, produit par des aiguilles isolées.

### Les avantages de la technologie Intensif:

- 1 Les aiguilles plaquées or non isolées du Intensif nécessitent moins de passages par traitement, pour des durées de traitement plus courtes et un plus grand confort pour les patients
- 2 Intensif offre des traitements complets sans saignement ou ecchymose
- 3 Les temps de récupération sont rapides : plus courts qu'avec tout autre dispositif présent sur le marché.
- 4 Le contrôle très précis de la profondeur des aiguilles procure la puissance de traitement la plus efficace adaptée à la zone de traitement spécifique.

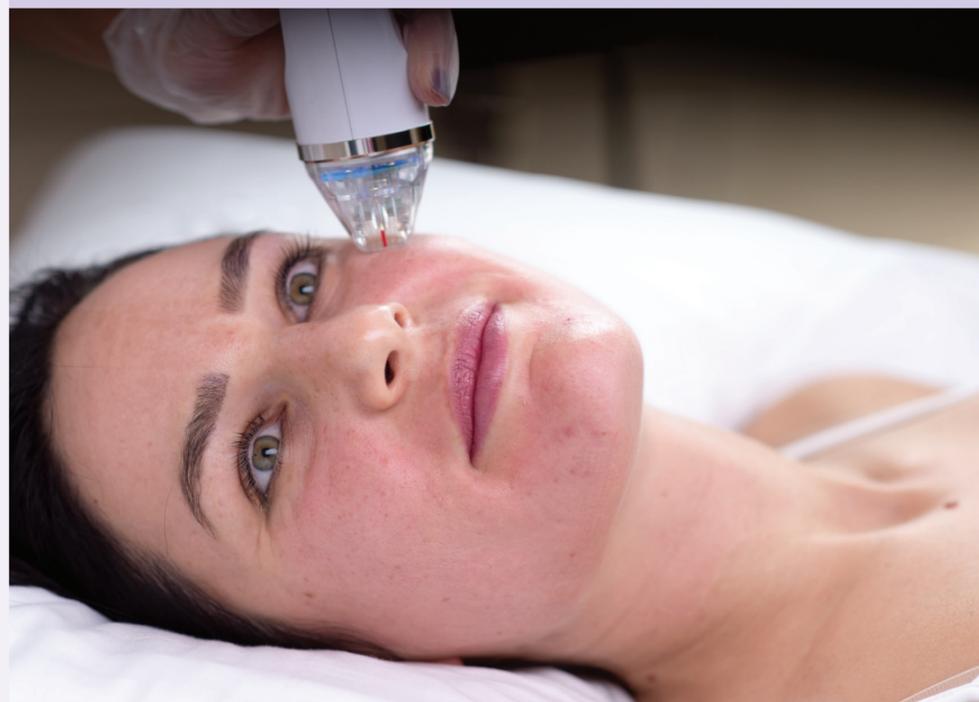

### Voyez la différence

que peut faire Intensif, alimenté par 3DEEP. Les traitements avec Intensif procurent des résultats immédiats, significatifs et visibles, avec une amélioration continue de la peau bien après la fin des traitements.



Photo avec la permission du Dr Gregory Keller, États-Unis



Photo avec la permission du Dr Daniel Barolet, Canada



Photo avec la permission du Dr Michael Gold, États-Unis



Photo avec la permission du Dr Kenneth Rothaus, États-Unis



Photo avec la permission du Dr Mark Taylor, États-Unis

3DEEP<sup>®</sup>

### À propos de la technologie de RF 3DEEP<sup>®</sup>

La technologie 3DEEP d'ENDYMED est la technologie cutanée la plus puissante et focalisée actuellement disponible. Contrairement aux technologies de RF monopolaire ou bipolaire qui sont plus superficielles et peuvent souvent s'avérer douloureuses ou risquées pour l'épiderme, 3DEEP génère une énergie contrôlée dans la profondeur du derme, atteignant 52 °C à 55 °C, avec un échauffement épidermique minimal. Cela est rendu possible en focalisant délicatement l'énergie du dispositif dans le derme pour un remodelage optimal et indolore du collagène.

La technologie 3DEEP d'ENDYMED inclut un contrôle en temps réel de l'impédance de la peau, fournissant la meilleure énergie possible dans la zone de traitement cible en faisant des ajustements continus basés sur l'impédance tissulaire au-dessus de la zone de traitement actuelle.

### Les traitements 3DEEP<sup>®</sup> les plus populaires

- Raffermissement de la peau
- Réduction des rides
- Amélioration de la texture de la peau
- Réduction de l'acné et de ses cicatrices
- Réduction des cicatrices traumatiques
- Réduction des vergetures

